

Roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu

Edukačný materiál pre zdravotníckych pracovníkov

Návod na použitie

1 Otvorte obal ACCUSOLu 35 v ktoromkoľvek rohu

- Skontrolujte zloženie roztoku a dátum expirácie
- Na vaku ACCUSOLu 35 môžete cítiť zvyškovú vlhkosť po procese sterilizácie
- Neprenášajte ACCUSOL 35 uchopením za vonkajší plastový obal



2 Pred použitím skontrolujte!

- ✓ Roztok ACCUSOLu 35 je číry a bez zvyškových častíc
- ✓ Vak nikde netečie
- ✓ Krídelká konektoru vaku sú v pozícii otvorené, nezdvíhajte vak za konektor vaku
- ✓ Krátky a dlhý zatavený spoj sú neporušené (zatlačte na veľkú a potom na malú komoru vaku); ACCUSOL 35 nesmie byť použitý ak niektorý zo spojov je porušený
- ✓ Počas celej procedúry používajte aseptické techniky¹



3 Pridajte predpísané liečivá

- Odstráňte modrý krúžok a vydezinfikujte port
- Pridajte aditíva
- Aditíva musia byť pridané pred otvorením dlhého spoja

¹ Obrázky sú len ilustračné a znázorňujú manipuláciu s vakom. Počas celej procedúry používajte jednorazové rukavice a aseptické techniky.

4 Otvorte dlhý spoj

- Položte vak ACCUSOLu35 konektorom smerom od vás
- Vezmite do rúk dve strany väčšej komory vaku
- Uchopením na stranách vak zatlačte dovnútra, zápästia sa vám dostanú pod vak a tým otvoríte dlhší spoj
- Zatlačte na hornú a dolnú komoru vaku na úplné otvorenie a zmiešanie obsahu
- Skontrolujte, či je dlhší spoj úplne otvorený
- Opakovane skontrolujte, či je roztok číry a bez zvyškových častíc



5 Otvorte krátky spoj

- Nadvihnite väčšiu komoru, vak pevne uchopte do oboch rúk a skrútením smerom ku konektoru vaku otvoríte krátky spoj
- Naklonením vaku a zatlačením roztoku vytvoríte tlak na otvorenie kratšieho zataveného spoja
- Skontrolujte, či je kratší spoj úplne otvorený
- Opakovane skontrolujte, či vak netečie



6 Zaveste ACCUSOL 35

- Odstráňte čiapocku z konektora vaku
- Pripojte linku pre substitučný roztok



7 Uvoľnite prietok ACCUSOLu 35

- Uchopte krídelká konektora vaku, ktoré sú do polovice uzatvorené, podľa obrázka na nasledujúcej strane
- Zatlačte krídelká pokiaľ nezaklapnú do plastového tela konektora



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

- Port pre pridávanie aditív musí byť pred pridaním aditív dezinfikovaný
- Aditíva musia byť pridané pred otvorením dlhšieho spoja
- Krátky a dlhý spoj musia byť otvorené pred pripojením na substitučnú linku
- Roztok ACCUSOL 35 musí byť použitý do 24 hodín od zamiešania
- Neprenášajte ACCUSOL 35 uchopením za vonkajší plastový obal
- Nezdvíhajte vak za konektor vaku
- Zriedkavo sa môžu objaviť zrazeniny roztoku niekoľko hodín po začiatku liečby, a ak sa zrazeniny vyskytnú, roztok Accusol 35 a súprava hadičiek pre CRRT musia byť ihneď vymenené a pacient musí byť starostlivo monitorovaný.



Otvor pre zavesenie vaku so zosilneným okrajom farebne rozlíšeným podľa koncentrácie draslíka:

Ružový: 0 mmol/l draslíka

Žltý: 2 mmol/l draslíka


Modrý: 4 mmol/l draslíka



Port pre pridávanie aditív



Dlhý spoj

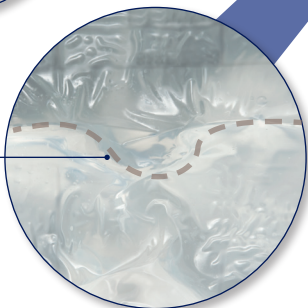

Krátky spoj



Konektor vaku s krídelkami

Čiapočka konektora



Pred zatvorením krídeliek konektora vaku odstráňte čiapočku a pripojte vak na substitučnú linku, potom otvorte konektor uzavretím krídeliek.

✓ Uzatvorte krídelká konektora vaku jednou rukou (budete počuť kliknutie)



✗ Nezatvárajte krídelká v tejto pozícii

ACCUSOL 35 musí byť použitý do 24 hodín od namiešania

	ACCUSOL 35	ACCUSOL 35 Potassium 2 mmol/l	ACCUSOL 35 Potassium 4 mmol/l
	ZLOŽENIE (mmol/l)*		
	Veľká komora		
Sodík	129	129	129
Draslík	0	2,67	5,33
Vápnik	2,33	2,33	2,33
Horčík	0,667	0,667	0,667
Chlorid	145,7	148,4	151,1
Glukóza	0	7,4	7,4
	Malá komora		
Sodík	173	173	173
Hydrogénuhličitan	160	160	160
	Námiešaný roztok		
Sodík	140	140	140
Draslík	0	2	4
Vápnik	1,75	1,75	1,75
Horčík	0,5	0,5	0,5
Chlorid	109,3	111,3	113,3
Hydrogénuhličitan	35	35	35
Glukóza	0	5,55	5,55
Osmolarita (mOsm/l)	287	296	300
	POPIS		
Objem	5000 ml	5000 ml	5000 ml
Kusov v balení	2	2	2

* Prevod jednotiek použitím vzorca molárna hmotnosť
 $\text{mol} = \text{hmotnosť} / \text{relatívna molekulová hmotnosť}$ Údaje podľa SPC

- Roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu
- 100% bikarbonátový pufer, bezlaktátový
- Rôzne koncentrácie draslíka s farebným kódovaním pre jasnú identifikáciu

Tento dokument neobsahuje všetky informácie.

Prosím, pred použitím produktov ACCUSOL 35 si pozorne prečítajte priložený súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC). Úplnú a aktuálnu verziu dokumentu SPC môžete nájsť v databáze registrovaných liekov na stránke www.sukl.sk alebo si ho môžete vyžiadať na Nikkiso Belgium bvba emailom na regulatory@nikkisomedical.com.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie:

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov / Hlásenie o nežiaducich účinkoch.

Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra>.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie môžu byť rovnako nahlásené na Nikkiso Belgium bvba telefonicky: +32 16 781 770 alebo emailom: complaint@nikkisomedical.com.